



輸入販売業者：株式会社 エスジーティー



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書を必ずお読みになってからご使用ください。

2024.08



 **DJO**® Product catalog



DJO global

DJO global社は、高品質の整形外科用製品を提供する世界的なリーディングカンパニーであり、その製品の多くは市場でトップの地位を占めています。予防から術前、術後、リハビリまで、広範囲に対する整形外科用・リハビリ用製品を提供しています。



DJOはProfessional Football Athletic Trainers Society(PFATS)のエリートパートナーです。



DJOは米国スキー・スノーボード連盟のメディカルパートナーです。

MEASUREMENT GUIDE

製品	計測位置	計測方法
● ストラピラックス P2		足首の一番細い部分の周囲を計測してください。
● スタビライジング スピード プロ P2		靴下を履いた状態で、かかとの頂点から足首を通って一周した周径を計測してください。
● リストラップ P3		手首の一番細い部分の周囲を計測してください。
● トライゾーン P3 ● ロトゥラックス P4 ● ゲニュラックス P4 ● トウル-プル ライト P4		膝蓋骨中心から15cm上の大腿周囲を計測してください。

※計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

SYMBOL DESCRIPTION

ラテックス不使用	左右兼用	通気性素材	多方向伸縮ニット

足首・ニットサポーター

| ストラピラックス StrapiLax™

シンプルで快適なフィット感の薄型ニットサポーター



主な用途

・足関節のサポート、安静保持

主な特長

- ・多方向に伸縮するニット生地と両サイドのパッドが足関節にしっかりフィット。
- ・テーピング理論(フィギュアエイト)を応用したストラップ。
- ・軽量でかさばりにくく、靴が履きやすい仕様。
- ・子供も使用できるXXSからのサイズ展開。
- ・ラテックスフリー。



品番	種類	適用範囲
453209	0 = XXS	17 cm ~ 18 cm
453200	1 = XS	19 cm ~ 20 cm
453201	2 = S	21 cm ~ 22 cm
453202	3 = M	23 cm ~ 24 cm
453203	4 = L	25 cm ~ 26 cm
453204	5 = XL	27 cm ~ 28 cm
453205	6 = XXL	29 cm ~ 30 cm

足首・ソフトブレース

| スタビライジング スピード プロ Stabilizing Speed Pro

3種類のストラップで足関節を快適にサポート



主な用途

- ・足関節のサポート
- ・スポーツ時のけがの予防

主な特長

- ・両サイドに取り外し可能なプラスチックステーを配置。
- ・本体上部の幅広ストラップは下腿を圧迫し、安定性を高める。
- ・距骨前面にはスピーディな装着を可能にするレースタイプのストラップを配置。
- ・伸縮性のないフィギュアエイトストラップが踵骨をサポート。
- ・スポーツシーンを想定し、快適性と耐久性を両立。
- ・ラテックスフリー。



品番	種類	適用範囲
453000	0=XXS	23cm ~ 25cm
453001	1 = XS	25cm ~ 28cm
453002	2 = S	28cm ~ 30cm
453003	3 = M	30cm ~ 33cm
453004	4 = L	33cm ~ 36cm
453005	5 = XL	36cm ~ 38cm
453006	6 = XXL	38cm ~ 41cm
453007	7=XXXL	41cm ~ 43cm

※靴下を履いた状態で、かかとの頂点から足首を通って一周した周径を計測してください。

手首・サポーター

リストラップ Wrist Wrap

日常生活やスポーツ時の衝撃から手首を守る



膝・ニットサポーター

トライゾーン TriZone

機能性と快適性を兼ね備えたスリーブ型膝サポーター



DONJOY®



主な用途

- ・手関節のサポート

主な特長

- ・甲側に厚さの異なる2枚のパッドを配置し、手関節の背屈、回内外の動きを抑制。
- ・使用するパッドの枚数を変えることで、固定力の調整が可能。
- ・2方向からのストラップが製品のズレを防ぎフィット性をアップ。
- ・肌に触れるインナー素材は快適な装着感。
- ・本体は耐久性に優れた織り加工のナイロンアウターシェル。
- ・製品は手洗いで洗濯可能。
- ・ラテックスフリー。

品番	種類	適用範囲
353601	S	12.5 cm ～ 15.0 cm
353602	M	15.0 cm ～ 17.5 cm
353603	L	17.5 cm ～ 20.0 cm

※手首の一番細い部分の周囲を計測してください。

ロトゥラックス RotuLax™

ステーやパテラパッドのフィット性を高める伸縮ニット構造のサポーター




主な用途

- ・膝関節のサポート・膝蓋骨の安定

主な特長

- ・多方向に伸縮するニット構造が膝関節にしっかりフィット。
- ・両サイドに柔軟性のあるスチール製ステーを配置し、側方の安定性を高める。
- ・膝蓋骨周囲のパテラパッドが膝蓋骨の安定性を高める。
- ・膝裏は締め付けの弱い生地で快適さアップ。

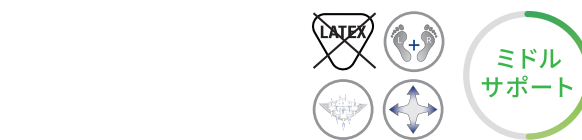

品番	種類	適用範囲
405500	1 = XS	35cm ～ 38 cm
405501	2 = S	39cm ～ 42 cm
405502	3 = M	43cm ～ 46 cm
405503	4 = L	47cm ～ 49 cm
405504	5 = XL	50cm ～ 53 cm
405505	6 = XXL	54cm ～ 57 cm
405506	7 = XXXL	58cm ～ 61 cm

※膝蓋骨中心から15cm上の大腿周囲を計測してください。

ゲニュラックス GenuLax™

硬度を高めたプラスチック製のヒンジとストラップで動揺性のある膝関節をサポート



主な用途

- ・膝関節のサポート

主な特長

- ・多方向に伸縮するニット構造が膝関節にしっかりフィット。
- ・膝蓋骨周囲のパテラパッドが膝蓋骨の安定性を高める。
- ・大腿と下腿のストラップで圧迫力の調節が可能。
- ・硬度を高めたプラスチック製のヒンジが膝の動きに追従。
- ・生地は通気性が高く、裏地には滑り止めシリコンライン付き。
- ・ラテックスフリー。



品番	種類	適用範囲
405400	1 = XS	35cm ～ 38 cm
405401	2 = S	39cm ～ 42 cm
405402	3 = M	43cm ～ 46 cm
405403	4 = L	47cm ～ 49 cm
405404	5 = XL	50cm ～ 53 cm
405405	6 = XXL	54cm ～ 57 cm
405406	7 = XXXL	58cm ～ 61 cm

※膝蓋骨中心から15cm上の大腿周囲を計測してください。

膝・サポーター

トゥル-プル ライト Tru-Pull Lite

シリコンパッドと両サイドのヒンジが膝蓋骨を側方からサポート



主な用途

- ・膝関節のサポート・膝蓋骨の側方偏位の制限

主な特長

- ・膝蓋骨外側にシリコンパッドを配置し、膝蓋骨の側方偏位を制限。
- ・両サイドに取り外し可能なヒンジ、内側に柔軟性のあるスチール製ステーを配置し、側方の安定性を高める。
- ・シリコンパッドと一体化した上下のストラップが膝蓋骨を正しいアライメントに誘導。



品番		種類	適用範囲
右	左		
405600	405610	1 = XS	33cm ～ 39cm
405601	405611	2 = S	39cm ～ 47cm
405602	405612	3 = M	47cm ～ 53cm
405603	405613	4 = L	53cm ～ 60cm
405604	405614	5 = XL	60cm ～ 67cm
405605	405615	6 = XXL	67cm ～ 75cm
405606	405616	7 = XXXL	75cm ～ 81cm

※膝蓋骨中心から15cm上の大腿周囲を計測してください。

- ・ストラップは長さの調節が可能。
- ・本体生地は吸湿発散性と通気性に優れ快適な装着感。
- ・ラテックスフリー。

COMPEX® FIXX™ 1.0 D

エクササイズ前後の筋肉を深部組織までケアする振動機器



品番	1箱入数	セット内容
594100	1セット	本体、トラベルケース、専用バッテリー（2個）、充電アダプタ、変換プラグ、バッテリーホルダー、アタッチメント（ボール型、コーン型、パドル型）、取扱説明書

主な用途

- ・振動による身体のケア

主な特長

- ・部位やコンディションに合わせて3段階のスピード調整が可能。
＜1秒当たりのストローク数＞ 25sps/33sps/46sps
- ・アーム角度の調整ができるので背面などにも当てやすい。
- ・持ち運びに便利なワイヤレスタイプ。
- ・すべりにくく持ちやすいハンドルで、セルフでも使いやすい。
- ・アタッチメントを交換して目的や部位に合わせて使い分けができる。



別売品

Fixx™ 専用バッテリー



品番	1箱入数
594200	1個

Fixx™ 専用アタッチメントセット



品番	1箱入数	セット内容
594201	1セット	コーン型、パドル型 各1個

製品の詳細や使い方は
**How To動画で
Check!**



特長や使い方も紹介！



施術ver.とセルフver.をご用意！

動画の視聴は
コチラから！



アイスマン ICEMAN CLEAR3™

安定した水流と均一な温度の冷却パッドで
効率的なアイシングを



主な用途


- ・患部のアイシング

主な特長


- ・持ち運びと保管に適したコンパクト設計。
- ・部位に合わせて選べる豊富なラインアップのパッド。
- ・氷交換サインがわかりやすいクリアカラーデザイン。
- ・ホース接続後の設定なしですぐに使用可能。
- ・注入口の凍結を防ぐ仕様。
- ・本体一体型で使いやすいホース用フック。

品番	1箱入数	セット内容
259300	1セット	本体、ホース、電源コード

※使用には別売りのラップオンパッドが必要です。

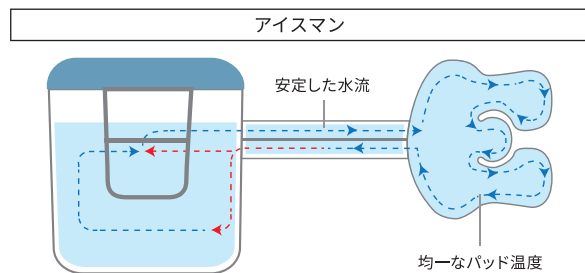

アイスマンは、デュアルポンプ再循環システムを採用。コールドパッド通過時に温められた水を、一定量保存してからより冷たい水と合流させることで、コールドパッド全体を均一に冷却することができます。

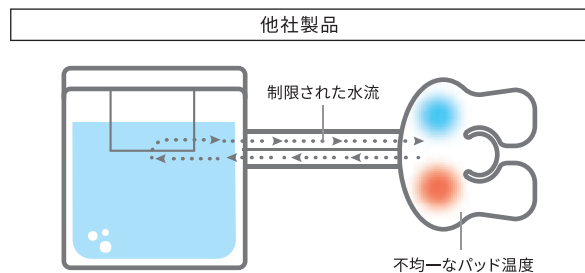

他社製品では、コールドパッドへの水流が制限されたり狭まったりすることで、コールドパッドの水量が変動したり、温度が不均一になることがあります。

ラップオンパッド Wrap-on Pads (別売品)



ユニバーサルラップ

品番	1箱入数
259310	1個



ショルダーラップ

品番	1箱入数
259320	1個



アングルラップ

品番	1箱入数
259330	1個